



ALIANS CLAVICLES.



SYSTÈME DE PLAQUES
POUR LA CLAVICULE

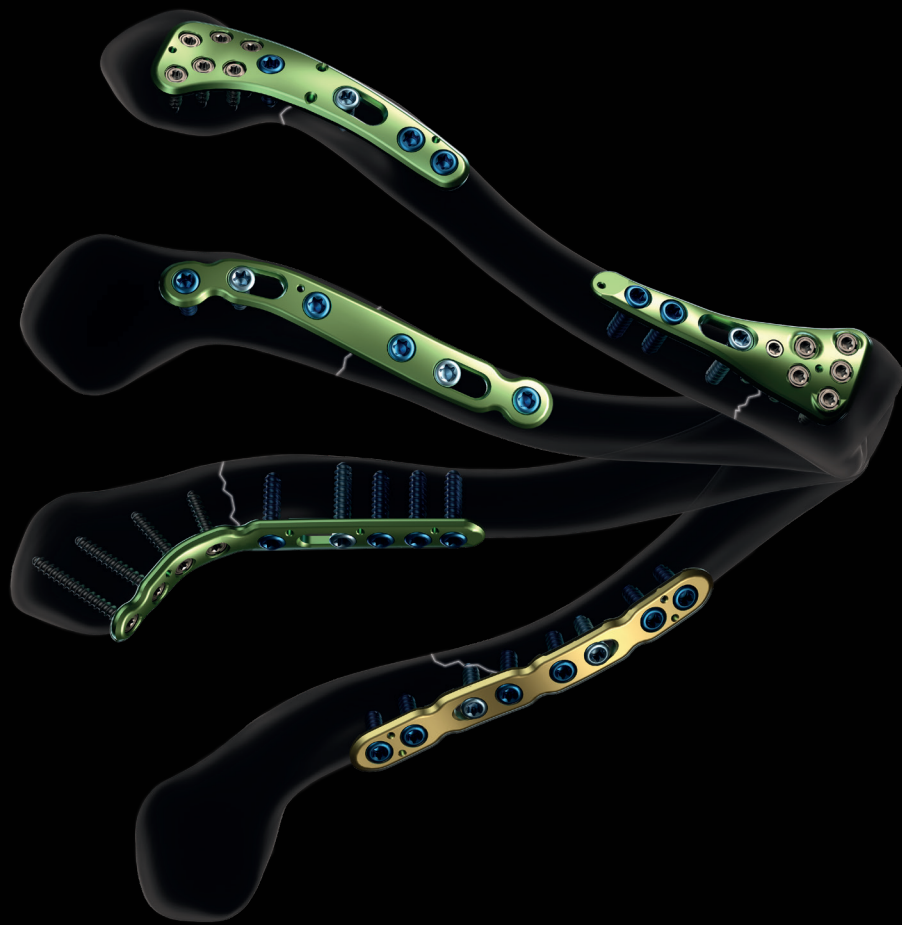

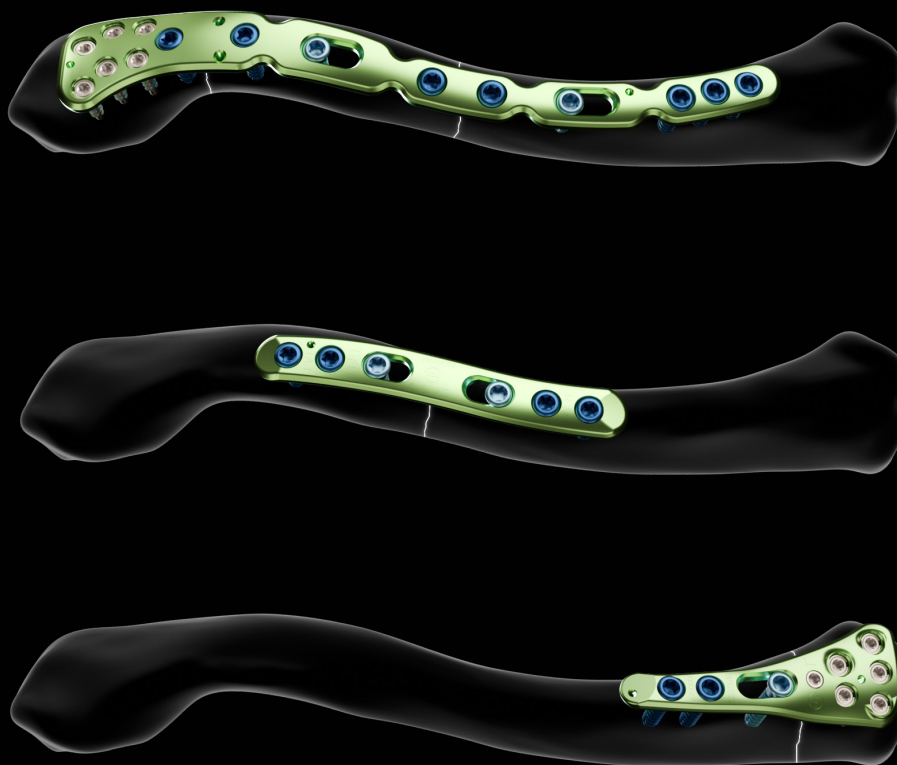

Alians Clavicle S.

SYSTÈME DE PLAQUES POUR LA CLAVICULE

Destination :

Les implants de la gamme Alians Clavicle S sont dédiés à la fixation des fractures, retards de consolidation, pseudarthroses et ostéotomies de la clavicle chez l'adulte.

Contre-indications :

- Grossesse.
- Infections aiguës ou chroniques locales ou systémiques.
- Allergie à l'un des composants ou sensibilité aux corps étrangers.

Caractéristiques des plaques.


UNE GAMME COMPLÈTE DE PLAQUES SUPÉRIEURES

PLAQUES DÉDIÉES AU TIERS LATÉRAL DE LA CLAVICULE

• Plaque supérieure latérale



• Plaque supérieure formable latérale

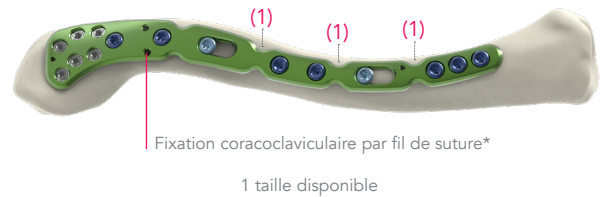

• Plaque supérieure latérale avec trous de suture



• Plaque supérieure extra latérale



⁽¹⁾ Grâce aux zones de cambrage, les plaques formables assurent une adaptation optimisée dans les cas de fractures complexes et de pseudarthroses. Les fers à cambrer (ANC452) peuvent être utilisés pour ces cas (voir page 5 pour plus d'informations).

* Les trous de suture sont compatibles avec des aiguilles de Ø0.9 mm maximum pour les plaques latérales standard et Ø1.2 mm pour les plaques de suture (CSTxL1D). Nous recommandons l'utilisation de fils de suture #2 USP (5 Ph. Eur.) et #5 USP (7 Ph. Eur.).


PLAQUES DÉDIÉES AU TIERS MOYEN DE LA CLAVICULE

• Plaque supérieure du tiers moyen



1 taille standard et 2 tailles étroites disponibles

• Plaque supérieure formable du tiers moyen

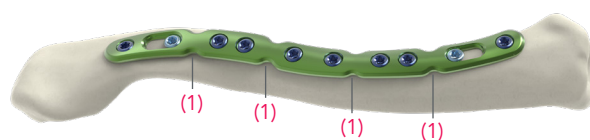


3 tailles disponibles

• Plaque supérieure du tiers moyen latéral



2 tailles disponibles

• Plaque supérieure formable du tiers moyen latéral

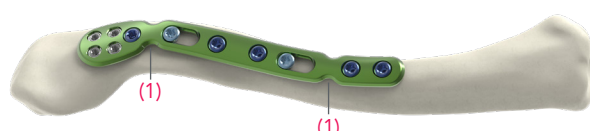

1 taille disponible

⁽¹⁾Grâce aux zones de cambrage, les plaques formables permettent une adaptation optimisée dans les cas de fractures complexes et de pseudarthroses. Les fers à cambrer (ANC452) peuvent être utilisés pour ces cas (voir page 5 pour plus d'informations).

PLAQUE DÉDIÉE AU TIERS MOYEN MÉDIAL DE LA CLAVICULE

• Plaque supérieure du tiers moyen médial



1 taille disponible

UNE GAMME COMPLÈTE DE PLAQUES ANTÉRIEURES

PLAQUE DÉDIÉE AU TIERS MOYEN DE LA CLAVICULE

• Plaque antérieure formable du tiers moyen




1 taille disponible

PLAQUES DÉDIÉES AU TIERS MOYEN LATÉRAL ET TIERS LATÉRAL DE LA CLAVICULE

• Plaque antérieure formable du tiers moyen latéral




1 taille disponible

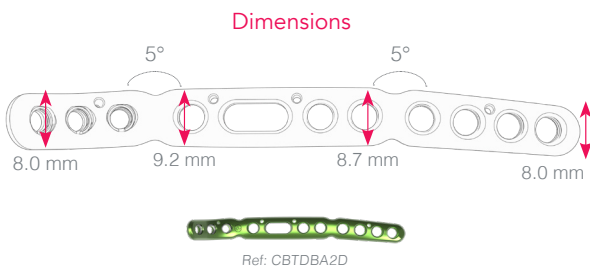

• Plaque antérieure formable latérale



1 taille disponible

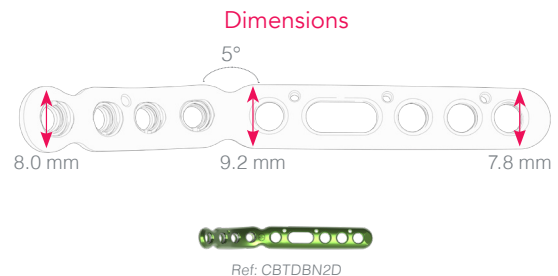

FIXATIONS

- Plots polyaxiaux DTS3 pour vis verrouillées Ø2.8 mm (SDT2.8LxxD), pour plaques latérales et médiales seulement.
- Plots pour vis verrouillées Ø3.5 mm (SOT3.5LxxD) et vis non verrouillées (CT3.5LxxD).
- Plots oblongs pour vis non verrouillées Ø3.5 mm (CT3.5LxxD) et Ø2.8 mm (CT2.8LxxD).

*Pour les plaques latérales antérieures : des versions totalement polyaxiales Ø2.8 sont également disponibles. La forme de ces plaques est strictement identique pour les deux versions.

Caractéristiques techniques.

DES IMPLANTS ANATOMIQUES

CONGRUENCE ANATOMIQUE OPTIMISÉE

Issue d'une technique de conception originale, basée sur une modélisation de la surface osseuse, cette génération d'implants revendique une congruence anatomique optimisée.


PLAQUES FORMABLES

Certaines plaques de la gamme Alians Clavicle S disposent de zones de cambrage. Il est possible de former la plaque grâce aux fers à cambrer (ANC452) tout en respectant les recommandations suivantes :

- Le cambrage n'est possible qu'au niveau des zones prévues à cet effet.
- Sur une même zone, le cambrage ne peut s'effectuer qu'une seule fois et dans la même direction.
- Le cambrage ne doit pas être réalisé de façon excessive.
- L'ovalisation des plots, lors du cambrage, représente un risque. Les plots doivent donc être protégés pour ne pas détériorer la fixation.




Ref: CTDML2D

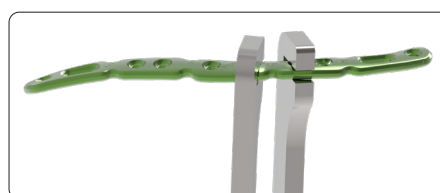

FIXATION POLYAXIALE VERROUILLÉE +/- 10°

La technologie DTS3 assure le verrouillage de la vis dans la plaque tout en permettant son angulation. Ce système facilite l'insertion des vis dans des directions divergentes ou convergentes, améliorant ainsi la stabilité de l'ensemble.

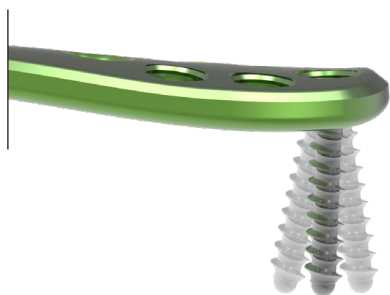




Polyaxialité de 20°



Technologie Dualtec System® III
Fixation polyaxiale verrouillée

SYSTÈME DE VERROUILLAGE MONOAXIAL

- La tête de vis vient en butée dans le plot garantissant le verrouillage.
- La tête de vis est enfouie dans la plaque.
- Plaque et vis composées du même matériau : titane allié.
- Des vis non verrouillées (CT3.5LxxD et CT2.8LxxD selon le diamètre du plot) peuvent être utilisées dans les plots verrouillés à la discrétion du chirurgien.

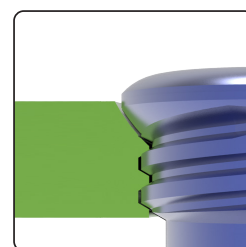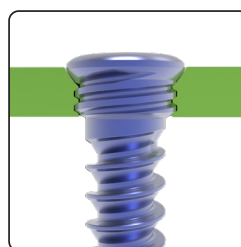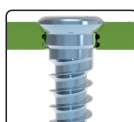


Le filetage sous tête de vis et le taraudage du plot de la plaque sont dotés des mêmes caractéristiques

FIXATIONS SPECIFIQUES DE LA PLAQUE ANTÉRIEURE DU TIERS MOYEN TAILLE 2

PLOT OBLONG À RAMPE VERROUILLÉ



Le plot oblong à rampe permet une compression simple et contrôlée⁽¹⁾ par l'interface vis/plaque ou une fixation verrouillée⁽²⁾ à l'aide d'une vis verrouillée.

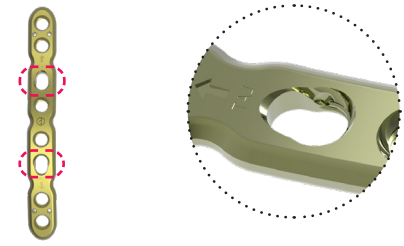

CBTSA2D



(1) Compression dynamique:

Attention : Afin de réaliser la compression, une vis non-verrouillée Ø3.5 mm (CT3.5LxD) peut être utilisée. Le foret Ø2.7 mm doit être maintenu manuellement pour percer dans la partie ovale du plot oblong, à l'opposé du trait de fracture. Ainsi l'insertion de la vis non verrouillée en haut de la rampe permet la mise en compression des fragment osseux.

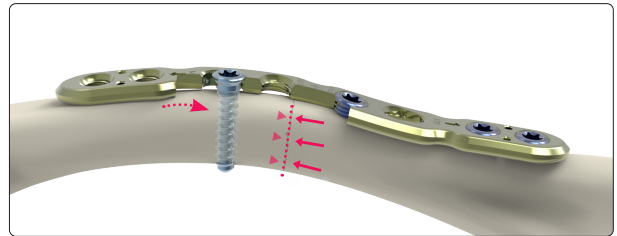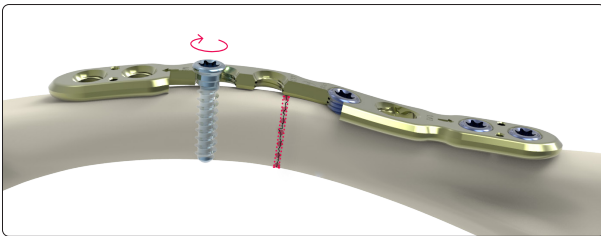

(2) Fixation verrouillée:

Si aucune compression supplémentaire n'est nécessaire, une vis verrouillée Ø3.5 mm (SOT3.5LxD) peut être utilisée. Elle doit être insérée dans la partie verrouillée du plot (pour le plot latéral dans la partie la plus médiale et pour le plot médial dans la partie la plus latérale). Pour cela, utiliser la jauge guide filetée Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 mm (ANC1445).

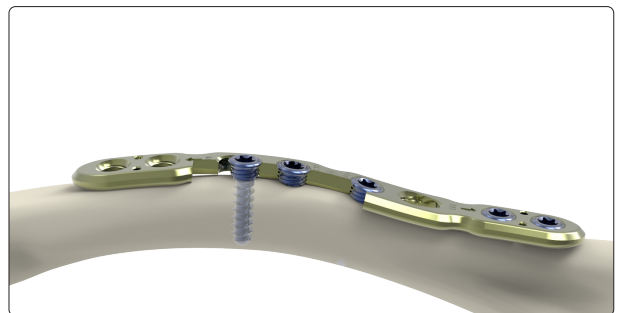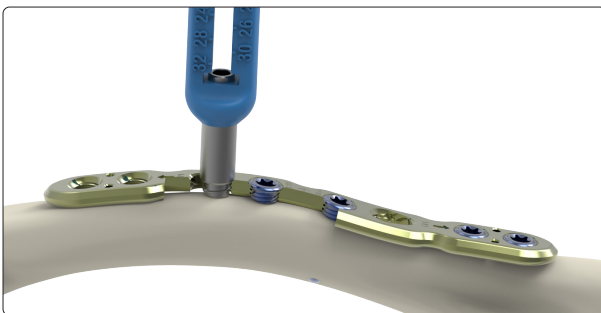

Technique opératoire.

PLAQUE DU TIERS MOYEN LATERAL (PAGE 1/2)

Technique opératoire applicable pour toutes les plaques du tiers moyen et du tiers moyen latéralisées avec des vis Ø3.5 mm uniquement - Exemple d'une plaque du tiers moyen latéralisée taille 2 (CTDML2D)

CARACTERISTIQUES DES FORETS

Le kit Alians Clavicle S offre deux types de forets différents :

• **Forets standard**

- ANC1356 (Ø2.0 mm)
- ANC1355 (Ø2.7 mm)

• **Forets à butée**

- ANC1357 (Ø2.0 mm)
- ANC1381 (Ø2.7 mm)

Les forets à butée et leur jauge guide associée ont été conçus pour un perçage maximum correspondant à une vis de 18 mm. Une pénétration excessive est évitée, protégeant ainsi les tissus environnants, notamment l'artère sous clavière.

Le choix d'utiliser un foret standard ou un foret à butée est entièrement laissé à la discrétion du chirurgien. Les deux versions sont entièrement compatibles avec le reste de l'instrumentation et la seule différence est la longueur de l'instrument.





Les forets à butée sont identifiables grâce aux traits de marquage au niveau de l'encliquetage rapide ^(a).

FORETS À BUTÉE

Réf.	Ø	Longueur max
ANC1357	Ø2.0 mm	18 mm
ANC1381	Ø2.7 mm	18 mm

ANC1357

ANC1381

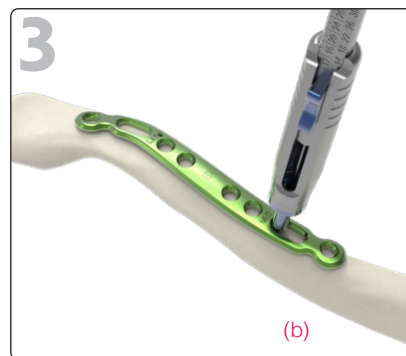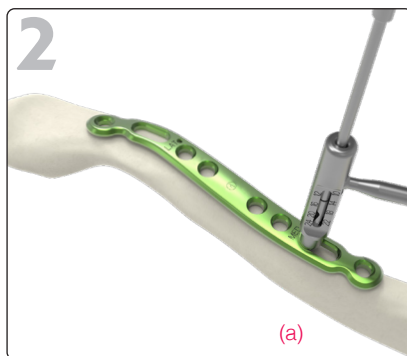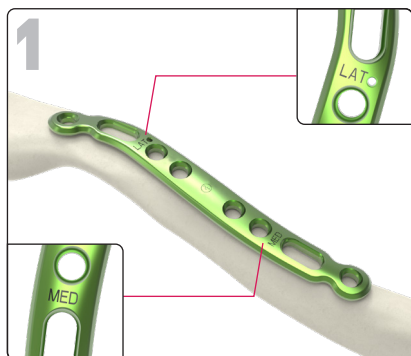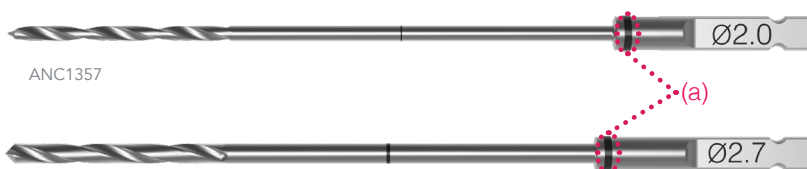

La plaque peut être fixée temporairement à l'aide de pinces ou en utilisant des broches Ø1.2 mm (33.0212.120) pour les plaques présentant des trous de broches.

Positionner la plaque à l'aide des marquages « LAT » (latérale) et « MED » (médiale).

Réaliser le perçage à l'aide de la jauge guide non filetée coudée (ANC1030) et le foret à butée Ø2.7 (ANC1381) dans le plot oblong médial.


Mesurer la longueur de la vis directement en utilisant la jauge guide non filetée coudée (ANC1030) ^(a) ou avec une jauge de longueur (ANC1028) ^(b).

PLAQUE DU TIERS MOYEN LATERAL (PAGE 2/2)




Insérer la vis non-verrouillée (CT3.5LxxD) en utilisant le tournevis (ANC1027).

Répéter les étapes 2 à 4 pour le plot oblong restant.

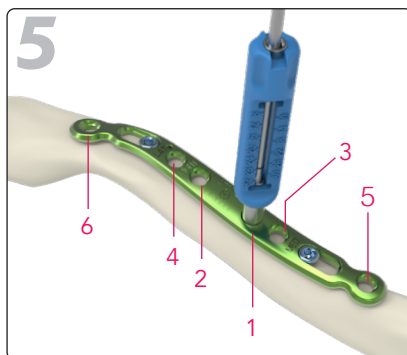

Insérer la jauge guide fileté (ANC1445) pour vis verrouillées Ø3.5 mm (SOT3.5LxxD) en partant des plots verrouillés les plus proches du trait de fracture vers ceux situés aux extrémités de la plaque.

Réaliser le perçage, soit à l'aide du foret à butée Ø2.7 (ANC1381), soit à l'aide du foret standard Ø2.7 mm (ANC1355).

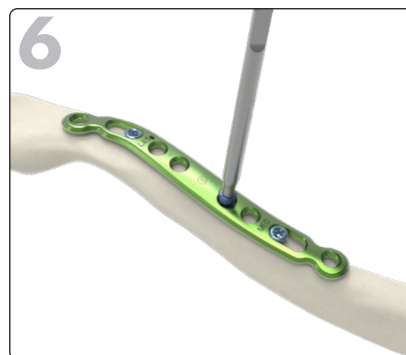


Mesurer la longueur de la vis directement en utilisant la jauge guide fileté (ANC1445) ou avec la jauge de longueur (ANC1028).

Insérer la vis verrouillée Ø3.5 mm (SOT3.5LxxD) en utilisant le tournevis (ANC1027).


Répéter les étapes 5 et 6 pour les vis verrouillées Ø3.5 mm (SOT3.5LxxD) restantes.

RÉSULTAT FINAL.

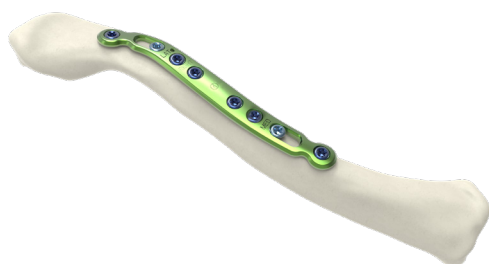


PLAQUE LATÉRALE (PAGE 1/2)

Technique opératoire applicable pour toutes les plaques latérales, de tiers moyen et médiales avec des vis Ø2.8 mm et Ø3.5 mm - Exemple d'une plaque latérale taille 2 (CTDL2D)

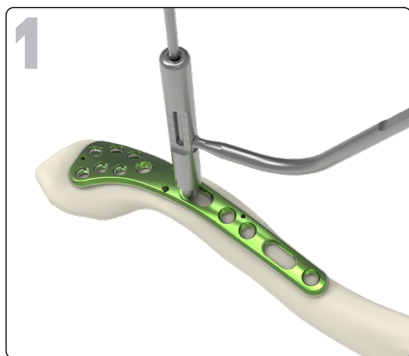

La plaque peut être fixée temporairement à l'aide de pinces ou en utilisant des broches Ø1.2 mm (33.0212.120) pour les plaques présentant des trous de broches.

Positionner la plaque et réaliser le perçage en utilisant la jauge guide non filetée coudée (ANC1030) et le foret (ANC1381 ou ANC1355) dans le plot oblong latéral.

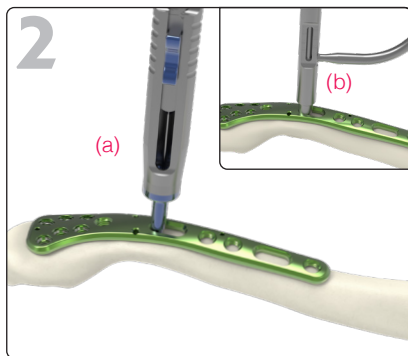

Mesurer la longueur de la vis avec une jauge de longueur (ANC1028)^(a) ou directement en utilisant la jauge guide non filetée coudée (ANC1030)^(b).




Insérer une vis non-verrouillée (CT3.5LxxD) en utilisant le tournevis (ANC1027).

Répéter les étapes 1 à 3 pour le plot oblong restant.



Insérer la jauge guide filetée (ANC1360) dans la partie épiphysaire de la plaque.


Ensuite, orienter selon la direction souhaitée et percer à l'aide du foret (ANC1356).

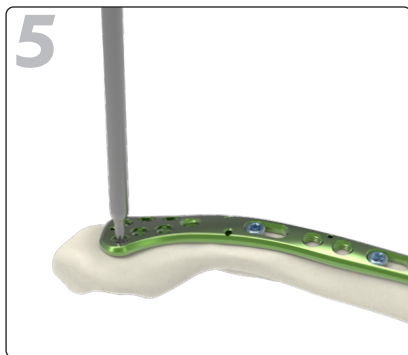

Mesurer la longueur de la vis directement en utilisant la jauge guide filetée (ANC1360) ou avec la jauge de longueur (ANC102).


Insérer une vis verrouillée Ø2.8 mm (SDT2.8LxxD) dans la plaque en utilisant le tournevis (ANC575).

Répéter les étapes 4 et 5 pour les autres vis de Ø2.8 mm

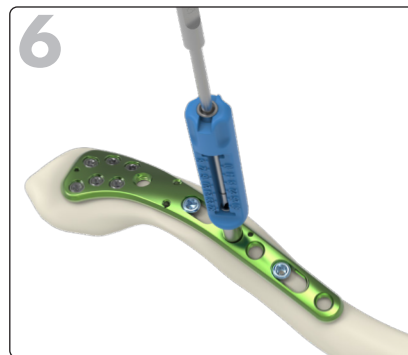


Pour les vis verrouillées Ø3.5 mm, insérer la jauge guide filetée (ANC1445), et percer (ANC1381 ou ANC1355).

Nous recommandons d'insérer les vis en partant des plots les plus proches du trait de fracture vers ceux situés à l'extrémité de la plaque.

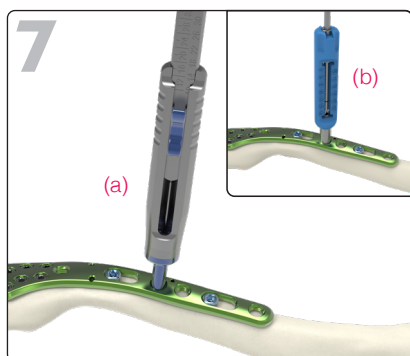


Mesurer la longueur de la vis avec une jauge de longueur (ANC1028)^(a) ou directement en utilisant la jauge guide fileté (ANC1445)^(b).

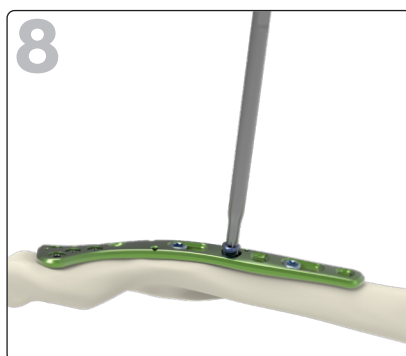

Insérer une vis verrouillée Ø3.5 mm (SOT3.5LxD) en utilisant le tournevis (ANC1027).


Répéter les mêmes étapes pour les vis verrouillées Ø3.5 mm (SOT3.5LxD) restantes.

RÉSULTAT FINAL.

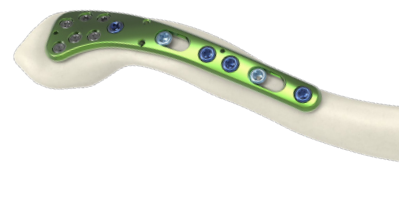

OPTION - GUIDE DOUBLE (UNIQUEMENT DISPONIBLE SUR DEMANDE)

Exemple de technique chirurgicale pour une chirurgie de butterfly fragment avec un guide double (ANC1056).

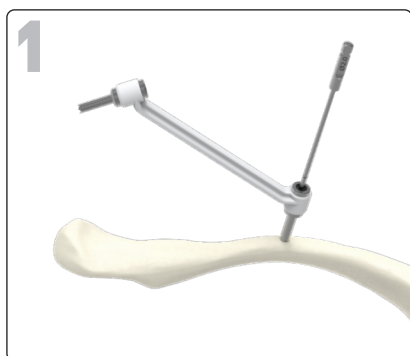


Choisir le diamètre approprié de vis (Ø2.8 mm ou Ø3.5 mm) pour le butterfly fragment.

Pour la vis Ø2.8 mm*, réaliser le perçage en utilisant le côté correspondant du guide (marqué Ø2.0 mm) et avec le foret à encliquetage rapide Ø2.0 mm (ANC1356).

La technique de rappel peut également être réalisée en utilisant le foret Ø2.7 mm (ANC1355) à travers l'autre extrémité du guide.


* Pour une vis Ø3.5 mm, utiliser l'autre côté du guide (marqué Ø2.7 mm) avec le foret à encliquetage rapide Ø2.7 mm (ANC1355) et le tournevis préhenseur (ANC1027) pour l'insertion de la vis.

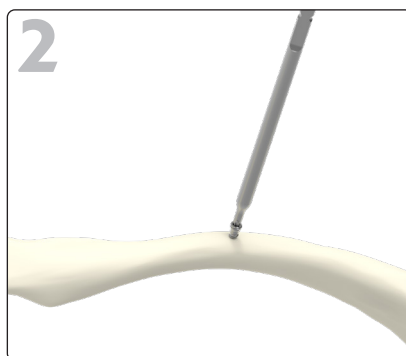

Mesurer la longueur de vis à l'aide de la jauge de longueur (ANC102).

Insérer une vis Ø2.8 à l'aide du tournevis préhenseur (ANC575).

RÉSULTAT FINAL.

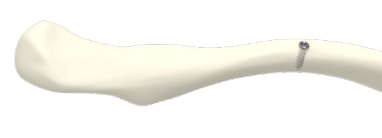

PRÉSENTATION TECHNIQUE DU GUIDE DOUBLE (ANC1056)



Références des implants.

PLAQUES SUPÉRIEURES

PLAQUES EXTRA-LATÉRALES

Plaques supérieures extra latérales

Réf.	Désignation
CBTDLN1D	Plaque extra latérale de clavicule - Supérieure - Droite - Taille 1 - 8 plots - L44 mm
CBTGLN1D	Plaque extra latérale de clavicule - Supérieure - Gauche - Taille 1 - 8 plots - L44 mm
CBTDLN2D	Plaque extra latérale de clavicule - Supérieure - Droite - Taille 2 - 10 plots - L55 mm
CBTGLN2D	Plaque extra latérale de clavicule - Supérieure - Gauche - Taille 2 - 10 plots - L55 mm



CBTDLN1D



CBTGLN1D



CBTDLN2D



CBTGLN2D

PLAQUES LATÉRALES

Plaques supérieures latérales

Réf.	Désignation
CTDL1D	Plaque latérale de clavicule - Supérieure - Droite - Taille 1 - 10 plots - L66 mm
CTGL1D	Plaque latérale de clavicule - Supérieure - Gauche - Taille 1 - 10 plots - L66 mm
CTDL2D	Plaque latérale de clavicule - Supérieure - Droite - Taille 2 - 12 plots - L91 mm
CTGL2D	Plaque latérale de clavicule - Supérieure - Left - Taille 2 - 12 plots - L91 mm



CTDL1D



CTGL1D



CTDL2D



CTGL2D

Plaques supérieures formables latérales

Réf.	Désignation
CBTDL2D	Plaque latérale formable de clavicule - Supérieure - Droite - Taille 2 - 15 plots - L138 mm
CBTGL2D	Plaque latérale formable de clavicule - Supérieure - Gauche - Taille 2 - 15 plots - L138 mm



CBTDL2D



CBTGL2D

PLAQUES LATÉRALES AVEC TROUS DE SUTURE

Plaques supérieures latérales avec trous de suture

Réf.	Désignation
CSTDL1D	Plaque latérale de clavicule - Supérieure - Droite - Taille 1 - 11 plots - L68 mm
CSTGL1D	Plaque latérale de clavicule - Supérieure - Gauche - Taille 1 - 11 plots - L68 mm



CSTDL1D



CSTGL1D

PLAQUES DU TIERS MOYEN LATÉRAL

Plaques supérieures du tiers moyen latéral


Réf.	Désignation
CTDML1D	Plaque 1/3 moyen latéral de clavicule - Supérieure - Droite - Taille 1 - 6 plots - L79 mm
CTGML1D	Plaque 1/3 moyen latéral de clavicule - Supérieure - Gauche - Taille 1 - 6 plots - L79 mm
CTDML2D	Plaque 1/3 moyen latéral de clavicule - Supérieure - Droite - Taille 2 - 8 plots - L93 mm
CTGML2D	Plaque 1/3 moyen latéral de clavicule - Supérieure - Gauche - Taille 2 - 8 plots - L93 mm



CTDML1D



CTGML1D

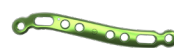

CTDML2D



CTGML2D

PLAQUES SUPÉRIEURES

PLAQUES DU TIERS MOYEN LATÉRAL

Plaques supérieures formables du tiers moyen latéral

Réf.	Désignation
CBTDM2D	Plaque 1/3 moyen latéral formable de clavicule - Supérieure - Droite - Taille 2 - 11 plots - L100 mm
CBTGML2D	Plaque 1/3 moyen latéral formable de clavicule - Supérieure - Gauche - Taille 2 - 11 plots - L100 mm



CBTDM2D



CBTGML2D

PLAQUES DU TIERS MOYEN

Plaques supérieures du tiers moyen - Étroites

Réf.	Désignation
CTDMN1D	Plaque 1/3 moyen de clavicule - Supérieure - Étroite - Droite - Taille 1 - 6 plots - L73 mm
CTGMN1D	Plaque 1/3 moyen de clavicule - Supérieure - Étroite - Gauche - Taille 1 - 6 plots - L73 mm
CTDMN2D	Plaque 1/3 moyen de clavicule - Supérieure - Étroite - Droite - Taille 2 - 6 plots - L91 mm
CTGMN2D	Plaque 1/3 moyen de clavicule - Supérieure - Étroite - Gauche - Taille 2 - 6 plots - L91 mm



CTDMN1D



CTGMN1D




CTDMN2D



CTGMN2D

Plaques supérieures du tiers moyen

Réf.	Désignation
CTDM2D	Plaque 1/3 moyen de clavicule - Supérieure - Droite - Taille 2 - 8 plots - L89 mm
CTGM2D	Plaque 1/3 moyen de clavicule - Supérieure - Gauche - Taille 2 - 8 plots - L89 mm

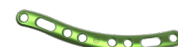

CTDM2D



CTGM2D

Plaques supérieures formables du tiers moyen

Réf.	Désignation
CBTDM1D	Plaque 1/3 moyen formable de clavicule - Supérieure - Droite - Taille 1 - 6 plots - L83 mm
CBTGM1D	Plaque 1/3 moyen formable de clavicule - Supérieure - Gauche - Taille 1 - 6 plots - L83 mm
CBTDM1.5D	Plaque 1/3 moyen formable de clavicule - Supérieure - Droite - Taille 1.5 - 10 plots - L105 mm
CBTGM1.5D	Plaque 1/3 moyen formable de clavicule - Supérieure - Gauche - Taille 1.5 - 10 plots - L105 mm
CBTDM2D	Plaque 1/3 moyen formable de clavicule - Supérieure - Droite - Taille 2 - 10 plots - L127 mm
CBTGM2D	Plaque 1/3 moyen formable de clavicule - Supérieure - Gauche - Taille 2 - 10 plots - L127 mm



CBTDM1D



CBTGM1D



CBTDM1.5D



CBTGM1.5D



CBTDM2D



CBTGM2D

PLAQUE DU TIERS MOYEN MÉDIAL

Plaques supérieures du tiers moyen médial

Réf.	Désignation
CBTDP1D	Plaque 1/3 moyen médial de clavicule - Supérieure - Droite - Taille 1 - 9 plots - L56 mm
CBTGP1D	Plaque 1/3 moyen médial de clavicule - Supérieure - Gauche - Taille 1 - 9 plots - L56 mm



CBTDP1D



CBTGP1D

PLAQUES ANTÉRIEURES

PLAQUES DU TIERS MOYEN

Plaque antérieure formable du tiers moyen

Réf.	Désignation
CBTSA2D	Plaque 1/3 moyen formable de clavicule - Antérieure - Symétrique - Taille 2 - 8 plots - L77 mm



CBTSA2D

PLAQUES DU TIERS MOYEN LATÉRAL

Plaques antérieures formables du tiers moyen latéral

Réf.	Désignation
CBTDBA2D	Plaque 1/3 moyen latéral formable de clavicule - Antérieure - Droite - Taille 2 - 11 plots - L89 mm
CBTGBA2D	Plaque 1/3 moyen latéral formable de clavicule - Antérieure - Gauche - Taille 2 - 11 plots - L89 mm
CBTDBA2D2.8*	Plaque 1/3 moyen latéral formable polyaxiale de clavicule - Antérieure - Droite - Taille 2 - 11 plots - L89 mm
CBTGBA2D2.8*	Plaque 1/3 moyen latéral formable polyaxiale de clavicule - Antérieure - Gauche - Taille 2 - 11 plots - L89 mm



CBTDBA2D



CBTGBA2D



(CBTDBA2D2.8*)



(CBTGBA2D2.8*)

PLAQUES LATÉRALES

Plaques antérieures formables latérales

Réf.	Désignation
CBTDBN2D	Plaque latérale formable de clavicule - Antérieure - Droite - Taille 2 - 9 plots - L71 mm
CBTGBN2D	Plaque latérale formable de clavicule - Antérieure - Gauche - Taille 2 - 9 plots - L71 mm
CBTDBN2D2.8*	Plaque latérale formable polyaxiale de clavicule - Antérieure - Droite - Taille 2 - 9 plots - L71 mm
CBTGBN2D2.8*	Plaque latérale formable polyaxiale de clavicule - Antérieure - Gauche - Taille 2 - 9 plots - L71 mm



CBTDBN2D



CBTGBN2D



(CBTDBN2D2.8*)



(CBTGBN2D2.8*)

* Plaques antérieures latérales et tiers moyen latérales sont aussi disponibles en version polyaxiale Ø2.8. Seule la plateforme de vis est différente, le reste du design reste strictement identique. - en option uniquement sur demande

KIT D'ABLATION

Pour tout retrait de matériel ALIANS CLAVICLE S, il est indispensable de commander les ancillaires d'ablation Newclip Technics :

- ANC042 : Mini conteneur - Base
- ANC350 : Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm - Taille 1
- ANC351 : Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm - Taille 2
- ANC575 : Tournevis T8 à encliquetage rapide - pour vis Ø2.8 mm
- ANC974 : Tournevis T15 à encliquetage rapide - pour vis Ø3.5 mm

Pour retirer les plaques ALIANS CLAVICLE S il faut d'abord desserrer toutes les vis sans les enlever complètement (cela évite la rotation de la plaque lors du retrait de la dernière vis).

Vis verrouillées Ø3.5 mm*

Réf.	Désignation
SOT3.5L10D à SOT3.5L24D	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L10 mm à 24mm (par incrément de 2mm)



*Anodisées en bleu

Vis non verrouillées Ø3.5 mm*

Réf.	Désignation
CT3.5L10D à CT3.5L24D	Vis non verrouillée Ø3.5 mm - L10 mm à 24mm (par incrément de 2mm)



*Anodisées en bleu clair

Vis verrouillées Ø2.8 mm*

Réf.	Désignation
SDT2.8L10D à SDT2.8L32D	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L10 mm à 32mm (par incrément de 2mm)



*Non anodisées

Vis non verrouillées Ø2.8 mm*

Réf.	Désignation
CT2.8L10D à CT2.8L24D	Vis non verrouillée Ø2.8 mm - L10 mm à 24mm (par incrément de 2mm)



*Anodisées en rose clair

VIS OPTIONNELLES (UNIQUEMENT DISPONIBLE SUR DEMANDE)

Vis Ø2.8 mm non verrouillées polyaxiales*

Réf.	Désignation
QDT2.8L10D à QDT2.8L32D	Vis non verrouillée Ø2.8 mm - L10 à 32 mm (2 mm d'incrément)



*Anodisées en jaune

Vis non verrouillées Ø2.8 mm pour plots Ø3.5 mm*

Réf.	Désignation
CET2.8L10D à CET2.8L24D	Vis non verrouillée Ø2.8 mm - Oblong 3.5 - L10 à 24 mm (2 mm d'incrément)



*Anodisées en marron

Vis Ø2.8 mm verrouillées pour plots Ø3.5 mm*

Réf.	Désignation
SOT2.8L10D à SOT2.8L24D	Vis verrouillée Ø2.8 mm - Oneclip 3.5 - L10 à 24 mm (2 mm d'incrément)




*Anodisées en turquoise

N.B.: Tous les implants sont également disponibles en version stérile. Un «-ST» est ajouté à la fin de la référence. Ex : «SDT2.8L10D-ST»

Références des instruments.

#	Réf.	Désignation	Qté	#	Réf.	Désignation	Qté
1	ANC102	Jauge de longueur pour vis Ø2.8 mm	1	11	ANC1030	Jauge guide non filetée coudée Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 mm	1
2	ANC195	Davier coudé 14 cm à boule Ø5 mm	2	12	ANC1056*	Guide double Ø2.8 mm / Ø2.1 mm pour vis Ø2.8 mm	1
3	ANC251	Davier Verbrugge 18 cm	2	13	ANC1355	Foret à encliquetage rapide Ø2.7 mm - L125 mm	1
4	ANC350	Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm - Taille 1	1	14	ANC1356	Foret à encliquetage rapide Ø2.0 mm - L125 mm	1
5	ANC351	Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm - Taille 2	1	15	ANC1357	Foret à butée Ø2.0 mm pour vis L18 mm à encliquetage rapide	1
6	ANC452	Fer à cambrer	2	16	ANC1360	Jauge guide filetée Ø2.0 mm pour vis Ø2.8 mm	2
7	ANC575	Tournevis T8 à encliquetage rapide	2	17	ANC1381	Foret à butée Ø2.7 mm pour vis L18 mm à encliquetage rapide	1
8	ANC986	Jauge guide non filetée coudée Ø2.0 mm pour vis Ø2.8 mm	1	18	ANC1445	Jauge guide filetée Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 mm	2
9	ANC1027	Tournevis préhenseur T15 à encliquetage rapide AO	2	19	33.0212.120	Broche Ø1.2 - L120 mm	8
10	ANC1028	Jauge de longueur pour vis Ø3.5 mm	1				

* Ancillaire optionnel, disponible uniquement sur demande

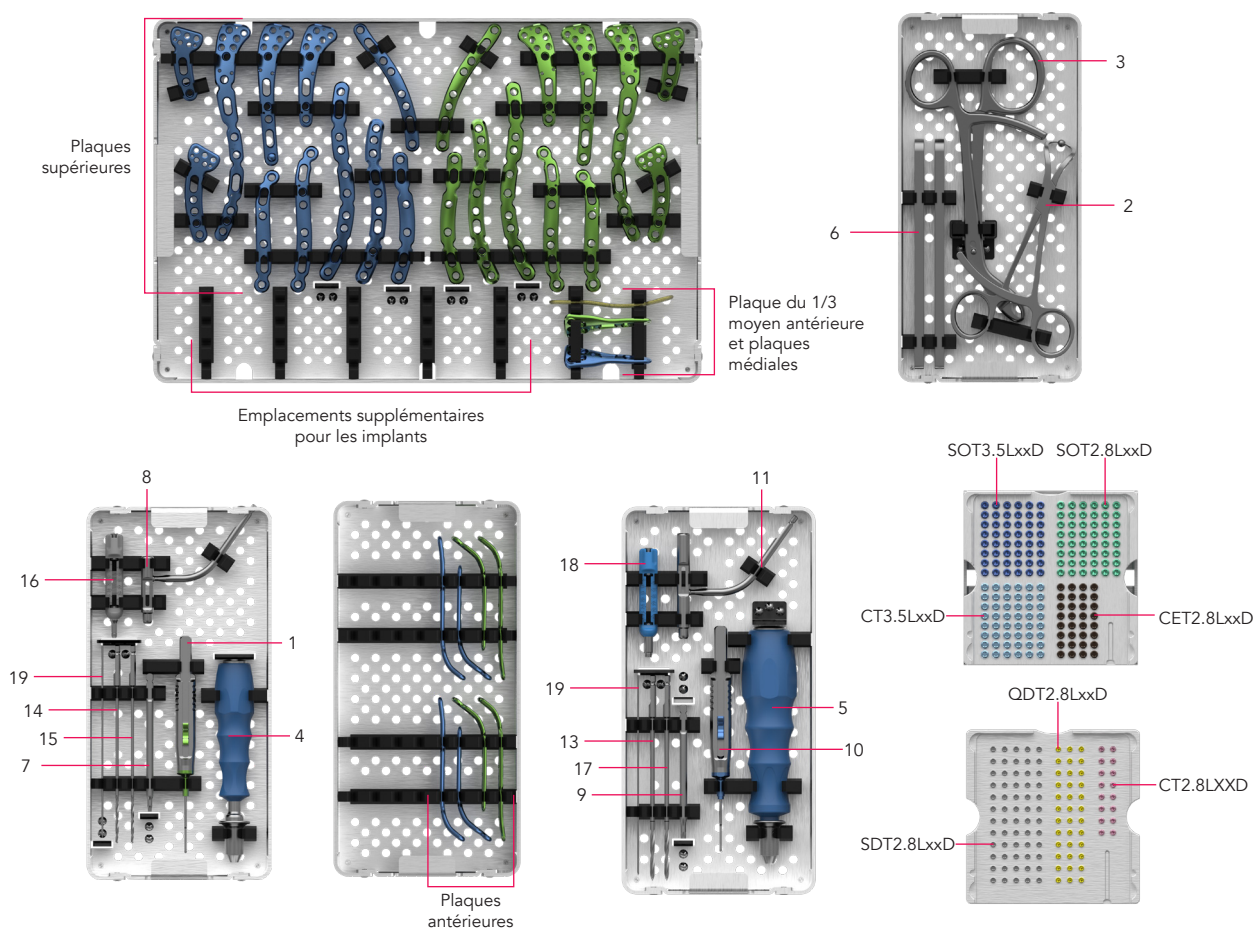

Options PSI

Réf.	Désignation
ANC042	Mini conteneur - Base
ANC863	Broche pour guide de coupe Ø1.9 mm - L15 mm
ANC880	Broche pour guide de coupe Ø1.9 mm - L30 mm
ANC1015	Guide de coupe patient spécifique pour ostéotomie de la clavicule
ANC1219	Broche pour guide de coupe Ø2.6 mm - L30 mm
ANC1220	Broche pour guide de coupe Ø2.6 mm - L15 mm
33.0212.070	Broche Ø1.2 - L70 mm

Options PSI additionnelles

Réf.	Désignation
ANC956	Cale patient spécifique
ANC1134	Guide de coupe patient spécifique pour greffon iliaque
ANC1135	Guide de coupe patient spécifique pour greffon synthétique
ANC1184	Guide de coupe patient spécifique pour tête fémorale
ANC1224	Guide de réalignement patient spécifique
ANC1227	Guide de coupe patient spécifique
ANC1349	Plot de maintien Ø1.2 mm - L10 mm




Compatible avec les guides de coupe patient spécifique (PSI)

Veuillez contacter votre représentant NEWCLIP TECHNICS si vous avez des questions sur la disponibilité des produits NEWCLIP TECHNICS dans votre région.

Références des conteneurs.

Conteneurs

Réf.	Désignation
ANC042	Mini conteneur - Base
ANC042/CB	Mini conteneur - Couvercle bombé
ANC1060/C	Conteneur Alians Clavicle S - Couvercle
ANC1060/M1	Conteneur Alians Clavicle S - Module 1 - Instrumentation pour vis Ø2.8 mm
ANC1060/M2	Conteneur Alians Clavicle S - Module 2 - Instrumentation pour vis Ø3.5 mm
ANC1060/M3	Conteneur - Taille 1/4 - Module - 4x8 fentes
ANC1060/M4	Conteneur Alians Clavicle S - Module 4 - Instrumentation générale
ANC1060/M5	Conteneur Alians Clavicle S - Module 5 - Plaques supérieures
ANC1060/R1	Conteneur Alians Clavicle S - Rack de vis pour vis Ø3.5 mm
ANC1060/R2	Conteneur Alians Clavicle S - Rack de vis pour vis Ø2.8 mm
ANC1434/B2	Conteneur 2 niveaux - Base

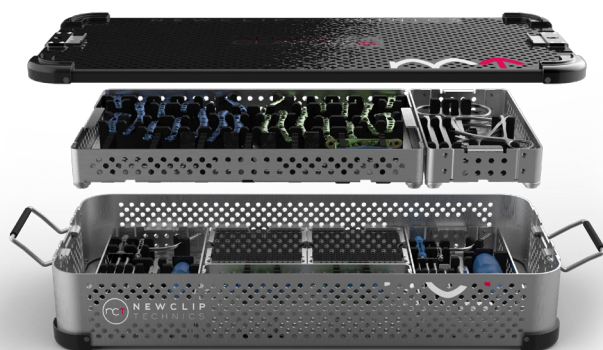

Ces informations ont pour intérêt de présenter la gamme de dispositifs médicaux de Newclip Technics. Avant toute utilisation des dispositifs Newclip Technics, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage et la notice d'utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation. Ces produits doivent être manipulés et/ou implantés par des personnes formées, qualifiées et ayant pris connaissance de la notice d'utilisation. Le chirurgien reste responsable de son propre jugement professionnel et clinique avant toute utilisation de produits spécifiques sur un patient donné. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays.

Fabricant : Newclip Technics - Brochure FR - Alians Clavicle S - ED3 - 05/2026- Dispositifs de classe IIb - CE1639 SGS BE - Avant toute utilisation des dispositifs Newclip Technics, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage. Ces produits doivent être manipulés et/ou implantés par des personnes formées, qualifiées et ayant pris connaissance de la notice d'utilisation. Newclip Technics - 45 rue des Garottières - 44115 Haute Goulaine, France. Nos filiales: Newclip USA - Newclip Australia - Newclip Germany - Newclip Japan - Newclip Iberia - Newclip Belgium - Newclip Italia.

newcliptechnics.com

